

ZÁRUKA NA PRODUKT

CZ

Pro uplatnění záruční opravy MISSMITO Speed je nezbytné, aby byly dodrženy následující podmínky. Na poškozeném, nefunkčním výrobku bude provedena servisní oprava. Pokud došlo k poruše přístroje z důvodu neopatrnosti uživatele, je zpravidla oprava účtována zákazníkovi. Pro reklamaci produktu, kontaktujte distributora nebo prodejce.

Záruční doba pro MISSMITO SPEED platí po dobu 1 roku od data nákupu. Pokud je přístroj mimo provoz v průběhu záručního roku a je prokázáno řádné používání, nabízíme bezplatnou opravu nebo výměnu zařízení.

Jednoletá bezplatná záruka se nevztahuje na následující případy:

- 1) Problémy s produktem díky nedbalosti uživatele nebo pokud došlo k poškození produktu z důvodu svévolné opravy uživatelem.
- 2) Pokud byl produkt poškozen opravou na jiných místech než v servisních střediscích určených společností.
- 3) Pokud je produkt poškozen nárazem.
- 4) Pokud je produkt mimo provoz díky používání komponentů, které nejsou určeny společností.
- 5) Pokud je adaptér mimo provoz (v případě, že se adaptér používal k napájení jiných zařízení).

SKLADOVÁNÍ A KONTROLA

1) Obecná pravidla používání produktu

- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
- Povrch otřete suchým hadříkem a udržujte zařízení v čistotě.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jej neuchovávejte na místech, kde se rychle mění teplota nebo s konstantním vysokým teplem či vlhkostí.
- Opravy nebo výměna součástí jinou než k tomu určenou osobou jsou zakázány.
- Nevystavujte zařízení nárazům a netřeste s ním.
- Běžným případem poruch je spíše poškozený adaptér než násadec. Je to proto, že když jej skladujete, většina zákazníků navine kabel do klubička a uloží jej. Pokud svinete elektrický drát, vnitřní linie se snadno zlomí.

2) Pravidelná kontrola

- Před použitím vždy zkontrolujte zařízení a adaptér.
- Před použitím zkontrolujte stabilitu zařízení a jestli funguje správně podle manuálu, zvlášť pokud nebylo delší dobu používáno.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte distributora:

ZNZ ELECTRONICS, s.r.o.
Újezdská 860/2
100 00, Praha 10
240 242 112
E-mail: eshop@fragranza.cz

ZÁRUKA NA PRODUKT

SK

Pre uplatnenie záručnej opravy MISSMITO Speed je nevyhnutné, aby boli dodržané nasledujúce podmienky. Na poškodenom, nefunkčnom výrobku bude provedena servisní oprava. Pokiaľ došlo k poruche prístroja z dôvodu neopatrnosti používateľa, je spravidla oprava účtovaná zákazníkovi. Pre reklamáciu produktu, kontaktujte distribútora alebo predajcu.

Záručná doba pre MISSMITO SPEED platí po dobu 1 roka od dátumu nákupu. Ak je prístroj mimo prevádzky v priebehu záručného roka a je preukázané riadne používanie, ponúkame bezplatnú opravu alebo výmenu zariadení.

Jednoročná bezplatná záruka sa nevztahuje na nasledujúce prípady:

- 1) Problémy s produktom vďaka nedbanlivosti používateľa alebo ak došlo k poškodeniu produktu z dôvodu svojoľvnej opravy užívateľom.
- 2) Ak je tento produkt poškodený opravou na iných miestach ako v servisných strediskách určených spoločnosťou.
- 3) Ak je produkt poškodený nárazom.
- 4) Ak je produkt mimo prevádzky vďaka používaniu komponentov, ktoré nie sú určené spoločnosťou.
- 5) Ak je adaptér mimo prevádzky (v prípade, že sa adaptér používal k apájaniu iných zariadení).

SKLADOVANIE A KONTROLA

1) Všeobecné pravidlá používania produktu

- Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho.
- Povrch utrite suchou handričkou a udržujte zariadenie v čistote.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani ho neuchováajte na miestach, kde sa rýchlo mení teplota alebo s konštantným vysokým teplom či vlhkosťou.
- Opravy alebo výmena súčastí inú ako na to určenou osobou sú zakázané.
- Nevystavujte zariadenie nárazom a netraste s ním.
- Bežným prípadom porúch je skôr poškodený adaptér než násadec. Je to preto, že keď ho skladujete, väčšina zákazníkov navinie kábel do klbka a uloží ho. Pokiaľ zviniete elektrický drôt, vnútorná línia sa ľahko zlomí.

2) Pravidelná kontrola


- Pred použitím vždy zkontrolujte zariadení a adaptér.
- Pred použitím skontrolujte stabilitu zariadenia a či funguje správne podľa manuálu, zvlášť pokiaľ nebolo dlhšiu dobu používané.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte distribútora:

ZNZ ELECTRONICS, s.r.o.
Újezdská 860/2
100 00, Praha 10
240 242 112
E-mail: eshop@fragranza.cz

MISSMITO SPEED

Uživatelský manuál

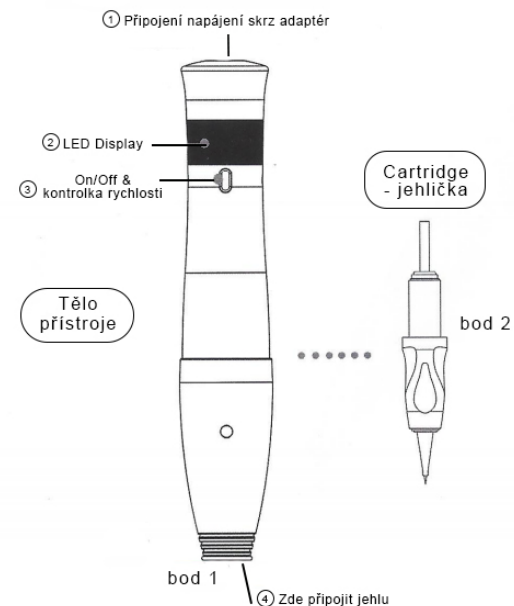

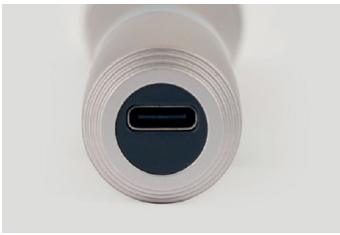

obrázek 1

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Nastavení
- 1) Připojte DC adaptér k napájení
- 2) Připojte USB kabel k DC adaptéru
- 3) Připojte kabel USB ke spodní straně násadce. (viz. Obrázek 1)

- Příprava
- 1) Odstraňte obal a vyjměte cartridge.
- 2) Srovnajte bod 1 s tělem přístroje s bodem 2 cartridge a poté ji vložte do násadce.
- 3) Otočte cartridge s ihlou ve směru hodinových ručiček, abyste ji zajistili.
- 4) Nastavte délku jehly - otočením horní části těla přístroje.
- 5) Pro vyjmutí cartridge, ji otočte proti směru hodinových ručiček.
- 6) Přístroj zapněte a nechte chvíli běžet naprázdno, aby se zahřál. (Vyberte rychlost od 1 do 8 - doporučujeme nejvyšší 8).

- Nastavení rychlosti jehliček.

- 1) Regulace otáček ON/OFF

Napájení (Zapnuto/Vypnuto)

- Pokud je nabíjecí adaptér připojen k tělu přístroje ke konektoru USB C (jak je znázorněno na obrázku 1), přístroj MISSMITO se nabíjí. Po signalizaci dobití nástroje odpojte kabel. Stisknutím tlačítka na těle přístroje a výběru rychlosti zahájíte provoz. V tuto chvíli je nastavena počáteční rychlost. Chcete-li zastavit provoz, podržte tlačítko stisknuté po dobu 2 až 3 sekund.

Kontrola rychlosti

- Chcete-li upravit rychlost, použijte tlačítko k nastavení od stupně 1 do stupně 8. V tomto okamžiku se rychlost zobrazí na obrázcích na LED displeji, takže můžete vybrat požadovanou rychlost a zkontrolovat údaje zobrazené na displeji.

2) Nastavení délky jehly

- Otáčením horní části těla přístroje upravte požadovanou délku jehly.

- 3 stupně délky. Doporučujeme začít na prostředním stupni, v oblasti tváří případně nastavit na stupeň 3 podle citlivosti klientky.

3) V případě poklesu rychlosti během používání

- Pokud je násadec vypnutý nebo přestane během používání fungovat, znamená to, že je stroj vybitý. Použijte ho znovu až po nabití pomocí USB C adaptéru. (Viz Napájení (Zapnuto/Vypnuto)).

OBSAH BALENÍ MISSMITO SPEED

- 1) Tělo přístroje
- 2) USB C kabel
- 3) DC adaptér
- 4) MTS cartridge - Jehlička (3 ks)
- 5) Odkládací donut

ODPORUČANÉ POUŽITIE

(CZ)

- Nastavenie
- 1) Připojte DC adaptér k napájení
- 2) Připojte USB kabel k DC adaptéru
- 3) Připojte kabel USB ku spodnej strane násadca. (viď. Obrázok 1)

- Příprava
- 1) Odstraňte obal a vyberte cartridge.
- 2) Zarovnajzte bod 1 s telom prístroja s bodom 2 cartridge a potom ju vložte do násadca.
- 3) Otočte cartridge s ihlou v smere hodinových ručičiek, aby ste ju zaistili.
- 4) Nastavte dĺžku ihly - otočením hornej časti tela prístroja.
- 5) Pre vybratie cartridge, ju otočte proti smeru hodinových ručičiek.
- 6) Prístroj zapnite a nechajte chvíľku bežať naprázdno, aby sa zahrial. (Vyberte rýchlosť od 1 do 8 - odporúčame najvyššiu 8).

- Nastavenie rýchlosti ihličiek.

- 1) Regulácia otáčok ON/OFF

Napájanie (On/Off)

- Ak je nabíjací adaptér pripojený k telu prístroja ku konektoru USB C (ako je znázornené na obrázku 1), Prístroj MISSMITO sa nabíja. Po signalizácii dobití nástroje odpojte kábel. Stlačením tlačidla na tele prístroja a výberu rýchlosti zahájite prevádzku. V tejto chvíli je nastavená počiatočná rýchlosť. Ak chcete zastaviť prevádzku, podržte tlačidlo stlačené po dobu 2 až 3 sekundy.

Kontrola rýchlosti

- Ak chcete upraviť rýchlosť, použite tlačidlo na nastavenie od stupňa 1 do stupňa 8. V tomto okamihu sa rýchlosť zobrazí na obrázkoch na LED displeji, takže môžete vybrať požadovanú rýchlosť a skontrolovať údaje zobrazené na displeji.

2) Nastavenie dĺžky ihly

- Otáčaním hornej časti tela prístroja upravte požadovanú dĺžku ihly.

- 3 úrovne dĺžky. Odporúčame začať na strednej úrovni. Prípadne upraviť na úroveň 3 v oblasti tváre v závislosti od citlivosti klienta.

3) V prípade poklesu rýchlosti počas používania

- Ak je násadec vypnutý alebo prestane počas používania fungovať, znamená to, že je stroj vybitý. Použite ho znovu až po nabití pomocou USB C adaptéra. (Pozri Napájanie (On/Off)).

OBSAH BALENIA MISSMITO SPEED

- 1) Telo prístroja
- 2) USB C kábel
- 3) DC adaptér
- 4) MTS cartridge - Jehlička (3 ks)
- 5) Odkladacie donut

(SK)



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

(CZ)

Před použitím si přečtěte příručku, abyste si byli plně vědomi správného používání zařízení.

• Bezpečnostní opatření během provozu

- 1) Pokud je vyvíjen přílišný tlak na jehlu, stroj nemusí začít fungovat. Pokud je jehla znehodnocená tlakem, vyměňte ji.
- 2) Pokud není adaptér používán v souladu s návodem, mohou se poškodit vnitřní části násadce. Pokud selže adaptér, který byl součástí balení zařízení, kontaktujte distributora.

- Missmito se nesmí používat na:
- 1) Osoby s chronickým onemocněním nebo osoby s horečkou 37°C a více.
- 2) Osoby s vysokým krevním tlakem, nakažlivým onemocněním nebo tuberkulózním onemocněním.
- 3) Osoby s nádorovým onemocněním nebo těhotné ženy.
- 4) Osoby s alergií nebo hemofilii.
- 5) Osoby, které užívají steroidy po dlouhou dobu nebo v ohrožení kapillarektázie kvůli abnormální funkci jater.
- 6) Osoby s rozšířenými žilkami nebo rosaceou.

- Nepoužívejte zařízení s napětím vyšším než 220 V AC - to může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poruše zařízení.
- Zařízení sami neopravujte ani nerozebírejte. To může vést k poškození zařízení.
- Nedotýkejte se zařízení a nevytahujte napájecí kabel mokrou rukou. To může vést k poškození zařízení.
- Kabel nikdy neolupujte ani neohýbajte. To může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem
- Napájecí kabel a adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud je nástroj nabitý a nebudete ho delší dobu používat. Ponecháte-li kabel delší dobu zapojený, může dojít k požáru.
- Zařízení nesmí být používáno jinými osobami než osobou, která má řádně nastudovaný uživatelský manuál. Hrozí nebezpečí nehody nebo špatné funkcionality zařízení.
- Pokud se zařízení nenabije po vybití baterie do 1 měsíce, může nastat problém s výkonem baterie.

UPOZORNENIA PRED POUŽITÍM

(SK)

Pred použitím si prečítajte príručku, aby ste si boli plne vedomi správneho používania zariadení.

• Bezpečnostné opatrenia počas prevádzky

- 1) Ak je vyvíjaný prílišný tlak na ihlu, stroj nemusí začať fungovať. Ak je ihla znehodnotená tlakom, vymeňte ju.
- 2) Ak nie je adaptér používaný v súlade s návodom, môžu sa poškodiť vnútorné časti násadca. Ak zlyhá adaptér, ktorý bol súčasťou balenia zariadení, kontaktujte distribútora.

- Missmito sa nesmie používať na:
- 1) Osoby s chronickým ochorením alebo osoby s horúčkou 37°C a viac.
- 2) Osoby s vysokým krvným tlakom, nakažlivým ochorením alebo tuberkulóznom ochorením.
- 3) Osoby s nádorovým ochorením alebo tehotné ženy.
- 4) Osoby s alergiou alebo hemofiliou.
- 5) Osoby, ktoré užívajú steroidy po dlhú dobu alebo v ohrození kapillarektázie kvôli abnormálnej funkcii pečene.
- 6) Osoby s rozšírenými žilkami alebo rosaceou.

- Nepoužívajte zariadenie s napätím vyšším ako 220V AC - to môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo k poruche zariadenia.
- Zariadenie sami neopravujte ani nerozoberajte. To môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Nedotýkajte sa zariadenia a nevyťahujte napájací kábel mokrou rukou. To môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Kábel nijako neolupujte ani neohýbajte. To môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom
- Napájací kábel a adaptér vyťahnite zo zásuvky, ak je nástroj nabitý a nebudete ho dlhšiu dobu používať. Ak necháte kábel dlhšiu dobu zapojený, môže dôjsť k požiaru.
- Zariadenie nesmie byť používané inými osobami než osobou, ktorá má riadne nastudované manuál. Hrozí nebezpečenstvo nehody alebo zlé funkcionality zariadení.
- Ak sa zariadenie nenabije po vybití batérie do 1 mesiaca, môže nastat problém s výkonom batérie.